

Smokerlyzer® Produktreihe

Zur Verwendung mit piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™

Benutzerhandbuch



CE
2797

Unsere Familie, die Neuerungen für ihre Gesundheit schafft.



bedfont

Definitionen

WARNHINWEIS: Zeigt eine Situation mit Gefährdungspotenzial an, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT: Zeigt eine Situation mit Gefährdungspotenzial an, die zu Schäden am Gerät führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS: Weist auf Informationen hin, die beim Gebrauch des Geräts zu beachten sind.

Wichtige Informationen/Hinweise

HINWEIS: Bedfont® erfasst nur technische Daten, keine Patientendaten.

WARNHINWEIS: Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder organische Lösungsmittel enthalten, da der elektrochemische Sensor im Inneren durch die Dämpfe beschädigt wird.

WARNHINWEIS: Das Gerät darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten eingetaucht oder mit Flüssigkeiten bespritzt werden.

WARNHINWEIS: Atemtests dürfen nur mit Zubehör von Bedfont® durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann zu falschen Messergebnissen führen.

WARNHINWEIS: Die Mundstücke sind jeweils nur für einen Patienten bestimmt und können für maximal 3 Tests verwendet werden. Häufigerer Gebrauch führt zu falschen Messergebnissen und erhöht die Gefahr einer Kreuzinfektion. Entsorgen Sie das Mundstück nach der Benutzung gemäß den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

WARNHINWEIS: Die Patienten müssen, für die während des Atemtests auf dem Gerät angezeigte Dauer ausatmen. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann zu falschen Messergebnissen führen.

WARNHINWEIS: Um zu gewährleisten, dass die Atemprobe mit der richtigen Durchflussmenge gemessen wird, muss das Gerät während des gesamten Tests senkrecht gehalten werden.

WARNHINWEIS: Die Luftauslässe am Gerät dürfen nicht blockiert oder verstopft sein. Blockierte bzw. Verstopfte Luftauslässe können falsche Messergebnisse zur Folge haben.

VORSICHT: Beachten Sie bei der Auswahl von Zubehör für den Smokerlyzer®-Gerät bitte, dass Zubehör, das nicht von Bedfont® empfohlen wurde, zu einem Leistungsverlust und zur Schädigung Ihres Smokerlyzer®-Geräts führen kann. Die Produktgarantie gilt nicht für Produktversagen oder -schädigung infolge der Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass der Gerät innerhalb der angegebenen Bereiche für Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit benutzt wird. Die Betriebstemperatur beträgt 15–40°C. Die Betriebsfeuchtigkeit beträgt 15–90% RH (nicht kondensierend).

VORSICHT: Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können die Funktion des Smokerlyzer®-Gerät beeinträchtigen.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Infektionsschutz finden Sie in der Bedfont®-Broschüre zum Infektionsschutz.

HINWEIS: Versuchen Sie nicht, das Gerät auf irgendeine Weise zu modifizieren und verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht zugelassen ist. Dadurch erlischt die Garantie und die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden.

HINWEIS: Bedfont® bietet auf Anfrage Schulungen für entsprechend qualifizierte Personen an.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Definitionen | 1 |
| Wichtige Informationen/Hinweise | 1 |
| Einleitung | 4 |
| Konformität..... | 4 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 4 |
| Kontraindikationen | 4 |
| Geräteansicht..... | 5 |
| Benutzeroberfläche | 6 |
| Benutzeroberfläche | 7 |
| Benutzeroberfläche | 8 |
| Atemprobe ausführen..... | 9 |
| Umgebungsluftmessung – nur Micro ^{+TM} | 13 |
| Patientenprofile – nur Micro ^{+TM} | 14 |
| Historie überprüfen – nur Micro ^{+TM} | 17 |
| Datum und Uhrzeit ändern – nur Micro ^{+TM} | 18 |
| Ändern der Atemanhaltezeit – nur Micro ^{+TM} | 19 |
| Ändern der Schwellenwerte für Atemtests | 20 |
| Wartungserinnerungen..... | 21 |
| Instandhaltung | 23 |
| Kalibrierung..... | 24 |
| Technische Daten..... | 29 |
| Sicherheitshinweise | 30 |
| Umgebung..... | 31 |
| COdata ^{+TM} software – Anschließen an den PC..... | 32 |
| Schaltflächen..... | 33 |
| Fehlerbehebung..... | 35 |
| Garantie | 38 |
| Rückgabeverfahren..... | 38 |
| Verantwortlicher Hersteller und Kontaktdaten..... | 38 |

Einleitung

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie über die Bedienung der Smokerlyzer® Gerät Micro⁺™, piCO™ und piCO^{baby}™ und ihres Zubehörs. Sie enthält wichtige Informationen über die Gerät, ihre Verwendung und Pflege sowie eine detaillierte Anleitung mit Bildschirmen und Illustrationen.

Der piCO™ Smokerlyzer® zeigt CO in ppm und COHb in %, der piCO^{baby}™ Smokerlyzer® zeigt CO in ppm, FCOHb in % und COHb in % und der Micro⁺™ Smokerlyzer® zeigt CO in ppm, COHb in % und FCOHb in % an. Alle Geräte führen jedoch nur eine direkte Messung von CO in Teilen pro Million (ppm) durch, die Prozentwerte für COHb und FCOHb werden auf der Basis klinischer Beweise berechnet. In der klinischen Forschung wurde nachgewiesen, dass eine aussagekräftige Beziehung zwischen Kohlenmonoxid und Carboxyhämoglobin hergestellt werden kann, wenn der Atem für kurze Zeit angehalten wird.

Konformität

Die Smokerlyzer® Gerät Micro⁺™, piCO™ und piCO^{baby}™ weisen die CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte auf.

Siehe den Abschnitt "Sicherheitshinweise" in dieser Bedienungsanleitung für weitere Informationen zur Konformität der Smokerlyzer® Gerät.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei den Smokerlyzer® Produkten piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™ handelt es sich um Kohlenmonoxidgerät. Sie sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal an mehreren Patienten im Rahmen von Raucherentwöhnungsprogrammen und in der Forschung bestimmt. Sie können auch als Messgerät für Kohlenmonoxidvergiftung im Gesundheitswesen verwendet werden.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Geräteansicht



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ein-/Aus-Taste | 6. Batteriefach |
| 2. USB-Port (zur Verwendung mit der Software COdata [™]) | 7. Luftauslass |
| 3. Anzeige | 8. Herstellerkennzeichnung |
| 4. Öffnung für D-piece [™] | 9. Luftauslass |
| 5. Lasche des Batteriefachs | 10. Reset-Schaltfläche |
| | 11. Programmierschalter |

Benutzeroberfläche

Micro⁺™ Smokerlyzer®



Startbildschirm

1. Ladestand der Batterie
2. Atemtest in der Schwangerschaft
3. Normaler Atemtest
4. Messung der Umgebungsluft
5. Patientenprofile
6. Einstellungen



Der Informationsbildschirm zeigt Informationen über das Gerät und den Sensor an.


Benutzeroberfläche

piCO™ Smokerlyzer®



Startbildschirm


1. Ladestand der Batterie
2. Atemtest
3. Einstellungen

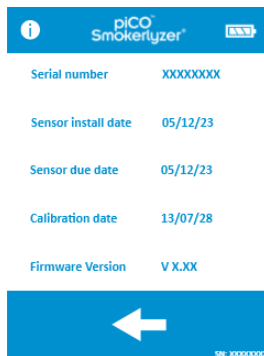

Der Informationsbildschirm zeigt Informationen über das Gerät und den Sensor an.


Benutzeroberfläche

piCO^{baby}™ Smokerlyzer®

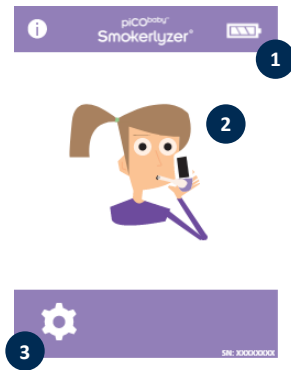

Startbildschirm

1. Ladestand der Batterie
2. Atemtest in der Schwangerschaft
3. Einstellungen

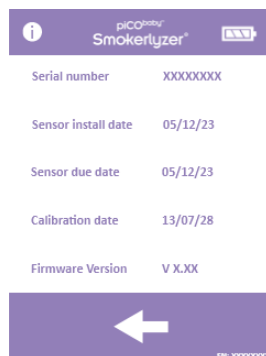


Der Informationsbildschirm zeigt Informationen über das Gerät und den Sensor an.

Atemprobe ausführen




Schalten Sie den Gerät an, indem Sie einmal den An-und Ausschalter drücken.


Drücken Sie das Symbol für den Atemtest auf dem Bildschirm, entweder das männliche oder das weibliche Symbol.

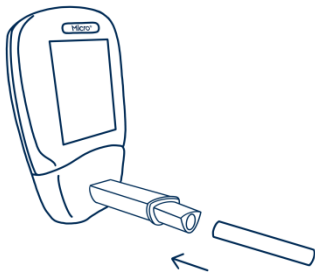

Befestigen Sie ein D-piece™ und ein neues Steribreath™ Eco Mundstück.

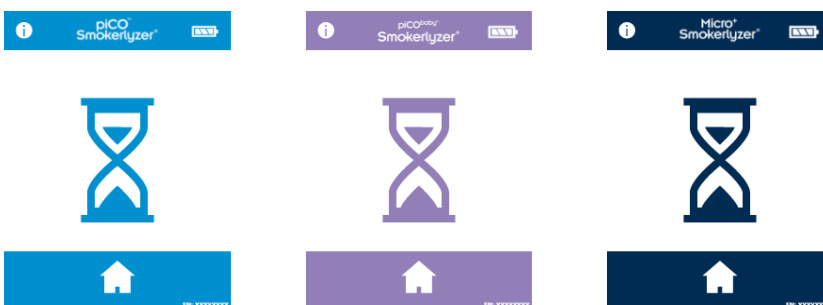

Das Gerät kann diesen Bildschirm einblenden, wenn der Sensor auf Null gestellt wird.

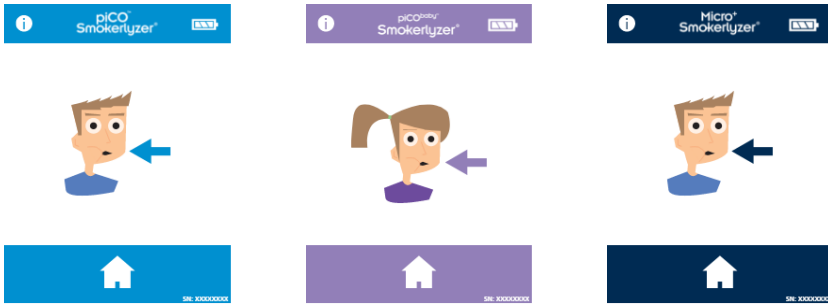


Einatmen und den Atem für die voreingestellten 15 Sekunden des Countdowns anhalten.


Sie können den Atemtest jederzeit durch Drücken der Starttaste abbrechen.




Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ist ein Piepen zu hören.

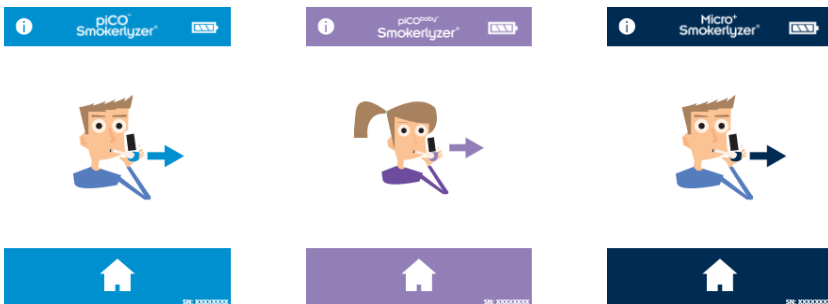

Blasen Sie langsam in das Mundstück, damit die Lunge vollständig entleert wird.

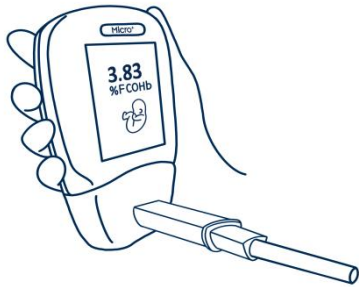


Der Wert in ppm und die entsprechenden Werte für %COHb und/oder %FCOHb steigen an und bleiben auf dem Bildschirm konstant.

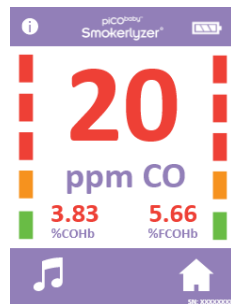


Wenn der Test abgeschlossen ist, erscheinen beim piCO™ und piCO^{baby}™ unten auf dem Bildschirm die Symbole Lautstärke und Home.

Wenn der Test abgeschlossen ist, erscheinen beim Micro™ die Symbole Lautstärke, Home und Speichern unten auf dem Bildschirm.

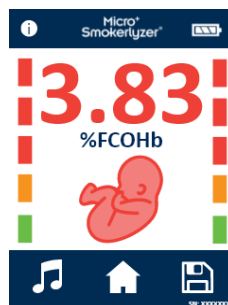

Wenn der Schwangerschafts-Atemtest auf dem Micro™ abgeschlossen ist, tippen Sie auf das Symbol "Fötus", um den Wert %FCOHb anzuzeigen.

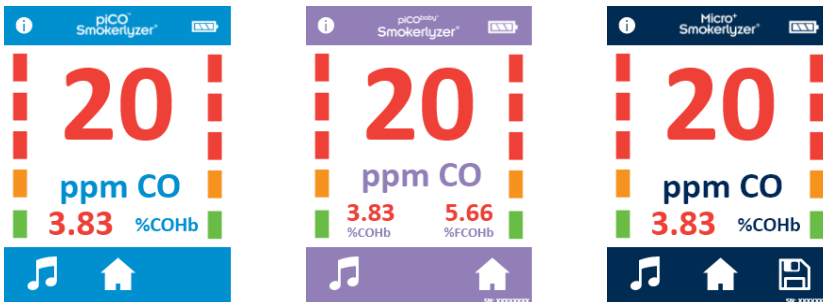

Wenn ein hoher Messwert aufgezeichnet wurde, kann der Gerät durch Drücken des Symbols Lautstärke stumm geschaltet werden.

Um den Atemtest zu wiederholen, drücken Sie das Home-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren, und wiederholen Sie die Schritte.

Um den Messwert zu speichern (nur beim Micro⁺™), drücken Sie das Symbol Speichern und wählen Sie das entsprechende Patientenprofil aus.

Entfernen Sie das D-piece™ zwischen den Atemproben, damit der Sensor mit frischer Luft gereinigt wird.

Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Nach 2 Minuten Untätigkeit schaltet sich das Gerät ab, um Strom zu sparen.

Umgebungsluftmessung – nur Micro⁺™



Der CO-Gehalt der Umgebungsluft kann mit dem Smokerlyzer® Micro⁺™ gemessen werden. Das ist besonders nützlich, wenn Patienten angeben, dass sie Nichtraucher sind, der Atemtest aber den Messwert für einen Raucher ergeben hat. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass sie CO aus der Umgebungsluft eingeatmet haben.

Drücken Sie für diesen das Umgebungsmodus-Symbol auf dem Bildschirm.




Das Gerät kann diesen Bildschirm einblenden, wenn der Sensor auf Null gestellt wird.



Der Micro⁺™ wird dann eine Echtzeitmessung der Umgebungsluft durchführen. Um den Test zu stoppen, drücken Sie das HOME-symbol.

Bedfont® empfiehlt, die Umgebungsluftmessung nicht als einzige Messgröße für passives Rauchen zu verwenden, da die sehr hohe Verbreitung von CO in dem mit Rauchen verbundenem Ausmaß zu falschen negativen Messwerten führen kann.


Patientenprofile – nur Micro⁺™

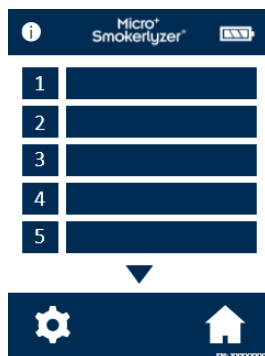



Alle auf dem Gerät gespeicherten Patientenprofile sind hier aufgeführt. Drücken Sie den Block mit dem jeweiligen Patientenprofil, um die Patientendaten anzuzeigen.




Um den Namen des Patienten zu ändern, drücken Sie auf das Textfeldsymbol.

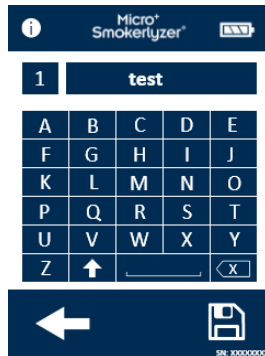


Drücken Sie die gewünschten Buchstaben. Klicken Sie zur Bestätigung auf das Speichern-Symbol oder auf den Zurück-Pfeil, um zurückzukehren.

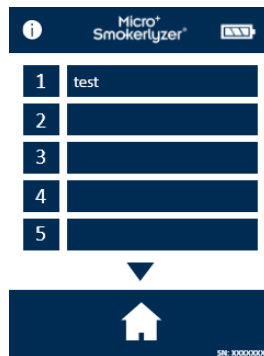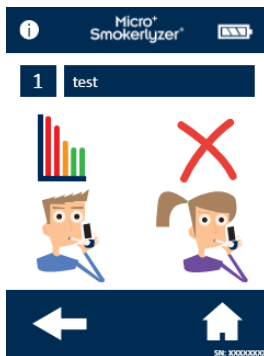

Nachdem der Name im Patientenprofil aktualisiert wurde, wird beim Aufrufen des Patientenprofils der Name eingeblendet.

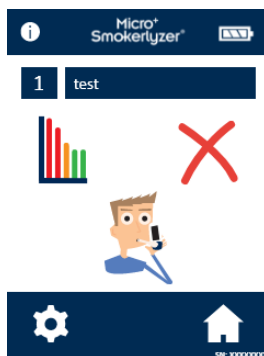


Wenn „Atemstart testen“ auf diesem Bildschirm ausgewählt wird, wird der Atemtest automatisch im Profil gespeichert. Wenn dem Patienten die Art des Atemtests zugeordnet wurde, erscheint nur ein Symbol.

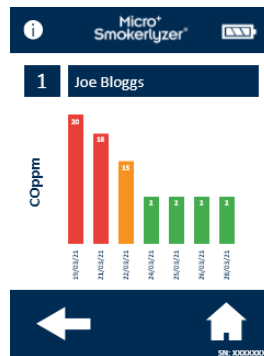

Um die Historie der Atemtestergebnisse des Patienten aufzurufen, drücken Sie das Symbol Diagramm. Dadurch wird die Testhistorie des Patienten geöffnet.



Um ein Patientenprofil zu löschen, drücken Sie das Symbol Löschen. Zur Bestätigung drücken Sie das Symbol Löschen erneut.

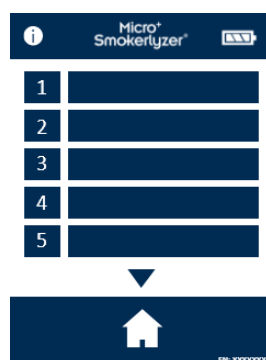

Nach dem Bestätigen wird das Patientenprofil nicht mehr auf der Patientenprofilliste eingeblendet.

Historie überprüfen – nur Micro⁺™



Drücken Sie das Symbol Einstellungen, um diese aufzurufen.




Drücken Sie das Symbol für den Verlauf.



Der Micro⁺™ zeichnet in seiner Historie alle Messwerte auf – bis maximal 150 Messwerte.


Datum und Uhrzeit ändern – nur Micro⁺™

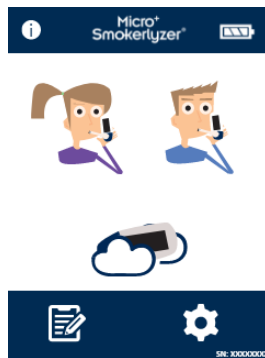

Drücken Sie das Symbol Einstellungen.




Drücken Sie das Symbol Datum und Uhrzeit.

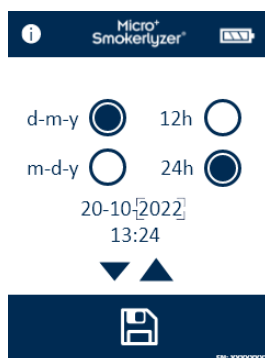

Wählen Sie entweder **T-M-J** (d-m-y) oder **M-T-J** (m-d-y) als Datumsformat und **12 h** oder **24 h** als Uhrzeitformat aus.

Zum Verstellen von Datum und Uhrzeit wählen Sie dann die Zahl aus und drücken Sie den Pfeil nach oben oder unten für einen höheren oder niedrigeren Wert. Drücken Sie das Symbol Speichern, um die Einstellungen zu speichern.


Ändern der Atemanhaltezeit – nur Micro⁺™

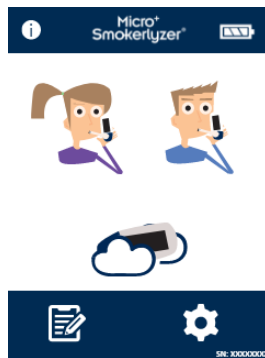

Drücken Sie das Symbol Einstellungen.



Drücken Sie das Symbol Atemanhaltezeit.

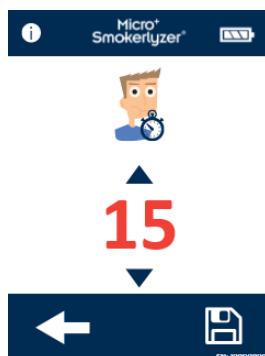


Sie können die Atemanhaltezeit mit den Pfeilen ändern. Drücken Sie das Symbol Speichern, um die Änderungen zu speichern.


Ändern der Schwellenwerte für Atemtests

| Ampelfarbe | Beschreibung | Messwert (ppm) | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | | piCO™ & Micro+™ | piCO ^{baby} ™ |
| Grün | Nichtraucher | 0 - 6 | 0 - 3 |
| Gelb | Grenzfall | 7 - 9 | 4 - 6 |
| 1 Rot | Raucher – leichte Abhängigkeit | 10 - 15 | 7 - 10 |
| 2 Rot | Raucher - mäßige Abhängigkeit | 16 - 25 | 11 - 15 |
| 3 Rot | Raucher – starke Abhängigkeit | 26 - 35 | 16 - 25 |
| 3 Blinkt Rot | Raucher – sehr starke Abhängigkeit | 36 + | 26 + |




In dieser Tabelle sind die voreingestellten Schwellenwerte für Atemtests angegeben.

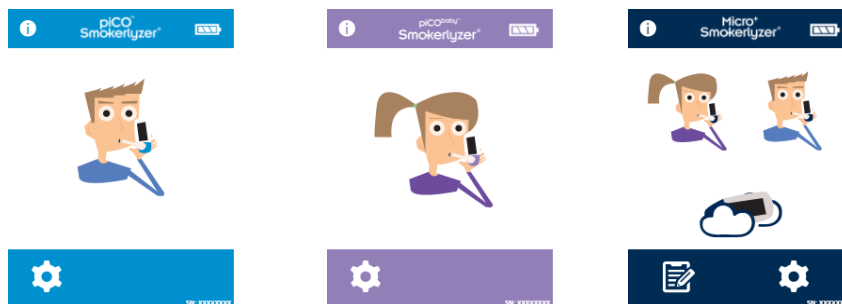

Drücken Sie das Symbol Einstellungen.

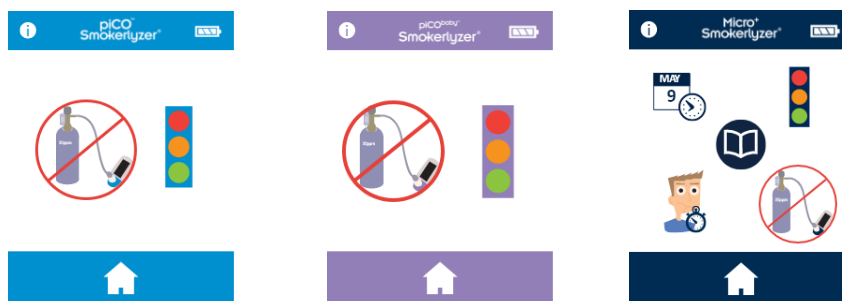

Drücken Sie das Symbol Ampel, um die Schwellenwerte für Atemtests zu ändern.

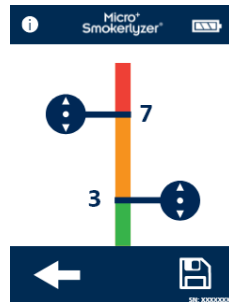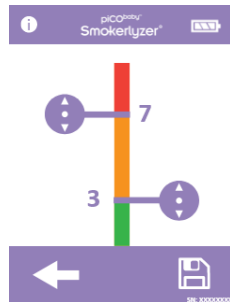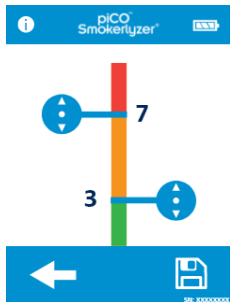

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie das Symbol Speichern.

Wartungserinnerungen



Wartungserinnerung für D-piece™ ändern

Das D-piece™ muss alle 30 Tage ausgewechselt werden. Diese Erinnerung wird beim Einschalten angezeigt.



Erinnerung zum Auswechseln des Sensors

Diese Erinnerung wird beim Einschalten angezeigt, wenn das Datum für das Auswechseln des Sensors näher rückt.



Wenn diese Erinnerung 60 Tage lang angezeigt wurde, wechselt dies auf den Alarm "rotes Datum".

Erinnerung Auswechseln des Sensors überfällig



Diese Erinnerung wird beim Einschalten angezeigt, wenn der Sensor ausgewechselt werden muss. Diese Erinnerung kann nicht umgangen werden.

Tippen Sie auf das Symbol "Start", um die Kalibrierung des Geräts zu starten.

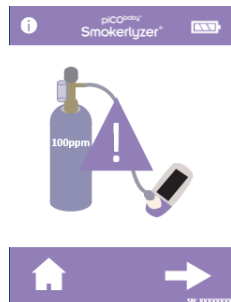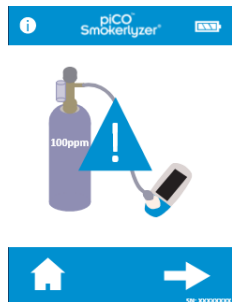

Erinnerung „Kalibrierung fällig“

Diese Erinnerung wird eingeblendet, nachdem das Symbol "Start" auf dem Bildschirm "Sensorwechsel überfällig" angetippt wurde. Um zur Kalibrierung zu gelangen, tippen Sie auf den rechten Pfeil.

Wenn der Sensor nicht gewechselt wurde, wird diese Erinnerung 6 Monate nach Abschluss der Kalibrierung ebenfalls angezeigt.

Instandhaltung

Routinemäßige Wartung

1. Die Mundstücke sind jeweils nur für einen Patienten bestimmt und können für maximal 3 Tests verwendet werden.
2. Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig gemäß den Vorgaben zur Infektionskontrolle.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf irgendeine Weise zu modifizieren und verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht zugelassen ist. Dadurch erlöschen die Garantie und die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden.
4. Bedfont® bietet auf Anfrage Schulungen für entsprechend qualifizierte Personen an.
5. Wenn Sie die Reset-Taste 30 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Gerät ganz zurückgesetzt. Dadurch werden alle gespeicherten Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen muss am Gerät das Datum/ die Uhrzeit neu eingestellt und es muss kalibriert werden, bevor es verwendet werden kann.
6. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn dieses Symbol erscheint.
7. Bedfont® empfiehlt das Entfernen der Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um Leckagen zu vermeiden.
8. Ersetzen Sie die Atemprobenahme D-piece™ alle 30 Tage oder wenn es sichtbar verschmutzt oder verunreinigt ist. Die Produkte piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™ Smokerlyzer® meldet, wenn das D-piece™ ausgetauscht werden soll, siehe das Symbol "D-piece™ auswechseln".
9. Der Sensor sollte alle 5 Jahre ausgewechselt werden. 60 Tage vor dem Sensorwechsel wird das Symbol „Countdown zum Sensorwechsel“ mit dem Datum angezeigt, an dem der Sensor gewechselt werden soll. Man kann dies ignorieren, indem man Home-Symbol drückt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Sensor ausgetauscht werden soll. Dann erscheint das Symbol "Sensor auswechseln". Wechseln Sie den Sensor, wenn Sie darin geschult, sind, oder schicken Sie ihn zu einem Bedfont® Ingenieur oder der örtliche Vertreter.



Reinigung

1. Die Smokerlyzer® Produkte werden für optimale Infektionskontrolle und antibakterielle Wirksamkeit mit technologie geformt. Bedfont® empfiehlt, das Instrument sowie die Außenflächen des D-piece™ zwischen jedem Patiententest mit einem alkoholfreien Wischtuch abzuwischen, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Eine Liste der zugelassenen Tücher finden Sie hier: <https://www.bedfont.com/cleaning-bedfont-devices>
Das D-piece™ kann nicht sterilisiert werden.
2. Verwenden Sie NIEMALS Alkohol oder Reinigungsmittel, die Alkohol oder andere organische Lösungsmittel enthalten, da die Langzeitbelastung dieser Dämpfe den CO-Sensor im Inneren beschädigt.
3. Das Gerät darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten eingetaucht oder mit Flüssigkeiten bespritzt werden.

Kalibrierung



Die Smokerlyzer® Gerät müssen bei Temperaturen zwischen 17°C und 25°C kalibriert werden. Wenn es zu kalt ist zum Kalibrieren (< 17°C), wird auf dem Bildschirm ein blaues Thermometer angezeigt.

Bringen Sie den Smokerlyzer® in eine wärmere Umgebung und versuchen Sie es später noch einmal. Wenn es zu warm ist zum Kalibrieren (> 25°C), wird auf dem Bildschirm ein rotes Thermometer angezeigt. Bringen Sie den Smokerlyzer® in eine kühlere Umgebung und versuchen Sie es später noch einmal.

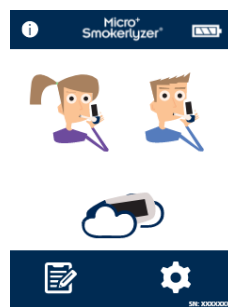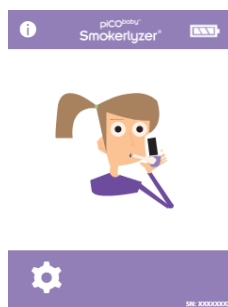

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste einmal drücken.


Drücken Sie das Symbol Einstellungen.

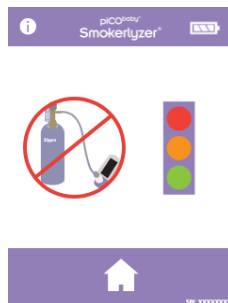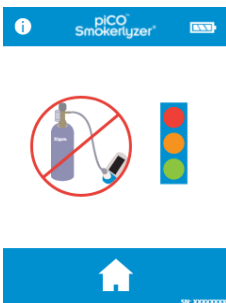


Drücken Sie das Symbol Kalibrierung fünf Mal, um die Funktion zu aktivieren.



Drücken Sie das Symbol Flasche einmal, um fortzufahren.

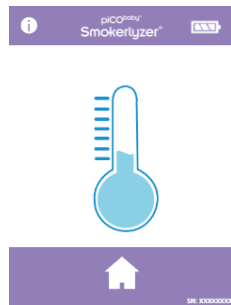




Wenn die Temperatur des Gerät zu niedrig ist für die Kalibrierung, wird das blaue Thermometer angezeigt. Versuchen Sie es später noch mal, wenn sich das Gerät erwärmt hat – wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Bedfont® oder den Fachhändler vor Ort.

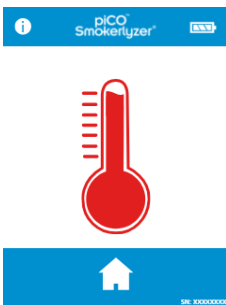


Wenn die Temperatur des Gerät zu hoch ist für die Kalibrierung, wird das rote Thermometer angezeigt. Versuchen Sie es später noch mal, wenn sich das Gerät erwärmt hat – wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Bedfont® oder den Fachhändler vor Ort.



Wenn dies erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Gerät auf Null gesetzt; geben Sie jetzt kein Gas zu.

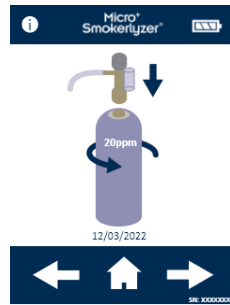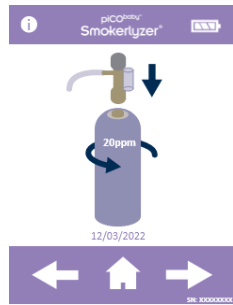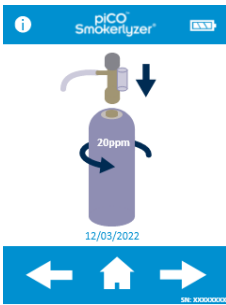



Die erste Stufe des Kalibriervorgangs wird auf dem Bildschirm angezeigt; befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kalibriervorgang abzuschließen.

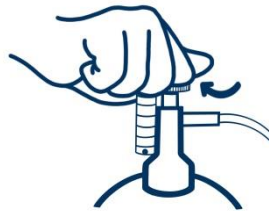


Vergewissern Sie sich, dass sich das Feinregulierungsventil in der Position Aus befindet.



Schrauben Sie das Feinregulierungsventil und die Durchflussmesser-Baugruppe auf den Gasbehälter. Das funktioniert am besten, wenn man den Gasbehälter in das Ventil schraubt.

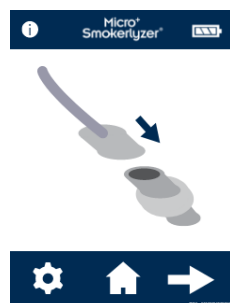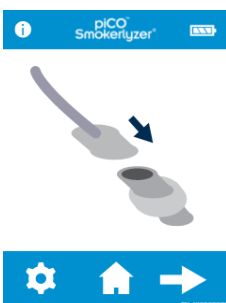

Drücken Sie das Symbol "Atemtest" auf dem Bildschirm, um einen Atemtest zu starten.

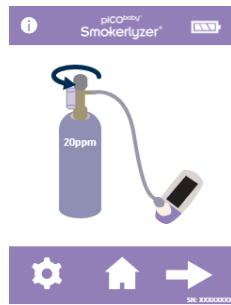


Wenn Sie durch das Symbol "Ausatmen" dazu aufgefordert werden, öffnen Sie das Feinregulierungsventil oder den Regler.



Lassen Sie das Gas mit 1 Liter pro Minute strömen.



Lassen Sie das Gas für die gesamte Dauer des Tests durch das Gerät strömen und überwachen Sie dabei die Durchflussmenge.

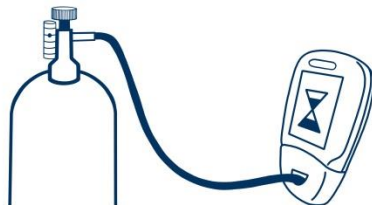

Wenn der zuletzt angezeigte Wert unter 15 ppm oder über 25 ppm liegt, stoppen Sie den Test und führen Sie die Kalibrierung durch oder senden Sie das Gerät unter Beachtung der Anweisungen an Bedfont® zurück für eine kostenlose Kalibrierung.



Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, wird dies durch das Haken-Symbol angezeigt. Drücken Sie das Home-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Wenn die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, wird dies durch das Symbol mit dem roten X angezeigt. Drücken Sie das Symbol mit den drehenden Pfeilen, um die Kalibrierung erneut durchzuführen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, siehe den Abschnitt "Fehlerbehebung" oder rufen Sie den Bedfont® Fachhändler vor Ort an.

Drücken Sie das Home-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Technische Daten

| | piCO™ | piCO ^{baby} ™ | Micro ⁺ ™ |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| Konzentrationsbereich | 0-150 ppm | 0-150 ppm | 0-500 ppm |
| Anzeige | Farbiger Touchscreen | | |
| Messprinzip | Elektrochemischer Sensor | | |
| Wiederholbarkeit | ≤ ± 5% | | |
| Genauigkeit | ≤ ± 2 ppm/5%* | | |
| Stromversorgung | 3 x AA (LR6 oder entsprechend) – bis zu 1000 Minuten 1 x CR2032 Lithium Knopfzelle Batterie | | |
| Reaktionszeit T ₉₀ | < 30 Sekunden | | |
| Betriebstemperatur | 15 - 40°C | | |
| Lager-/Transporttemperatur | 0 - 50°C | | |
| Betriebs-/Lager-/Transportdruck | Atmosphärendruck ± 10% | | |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 15 - 90% RH (relative Feuchte) (nicht kondensierend) | | |
| Lager-/Transportfeuchtigkeit | 0 - 95% (nicht kondensierend) | | |
| Erwartete lebensdauer des sensors | 5 Jahre | | |
| Sensorgenauigkeit | 1 ppm | | |
| Sensordrift | < 5% jährlich | | |
| Abmessungen | Ca. 37 mm X 77 mm X 140 mm | | |
| Gewicht | Ca. 215 g (inkl. Batterien) | | |
| Materialien | Gehäuse: Mischung aus Polykarbonat und ABS Antimikrobielles Additiv D-piece™: Polypropylen SteriBreath™ Eco: papier OneBreath™: Polypropylen | | |
| H ₂ Kreuzinterferenz | ≤ 6% | | |

* Es gilt der höhere Wert


Sicherheitshinweise

| | |
|---|---|
| Schutzgrad gegen elektrischen Schlag |  Anwendungsteil des Typs BF |
| Schutzart gegen elektrischen Schlag | Ausrüstung mit interner Stromversorgung |
| Schutzgrad gegen eindringende Flüssigkeiten | IPX0 – kein Schutz vor eindringendem Wasser |
| Grad der sicheren Anwendung in Umgebungen mit entzündlichen Narkosegasmischungen mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoffoxid | Gerät ist für die Anwendung in Umgebungen mit entzündlichen Gasmischungen nicht geeignet. |
| Konsultieren Sie die elektronische Gebrauchsanweisung |  |
| Im Lieferumfang des Geräts ist ein HF-Sender (Bluetooth) enthalten |  |
| CE-Kennzeichnung |  |
| EC-REP |  |
| Gleichstrom |  |
| Gemäß WEEE entsorgen |  |
| Seriennummer |  |
| Eindeutige Geräteidentifikation |  |
| Hersteller |  |
| Herstelldatum |  |
| Anzeige des Medizinprodukts |  |


Umgebung

Die Produkte piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™ Smokerlyzer® erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte in der Fassung der Vorschrift 2007/47/EG und der Norm EN 60601-1-2 für medizinische elektrische Geräte - Elektromagnetische Verträglichkeit.


WARNHINWEIS: Bei tragbaren HF-Kommunikationsgeräten (einschließlich Peripheriegeräten wie Antennenkabeln und externen Antennen) sollte im Betrieb ein Abstand von 30 cm (12“) zu allen Teilen der Produkte piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™ Smokerlyzer®, einschließlich deren vom Hersteller vorgeschriebener Kabel eingehalten werden. Andernfalls kann die Leistung dieser Geräte beeinträchtigt sein. Um Störungen zu vermeiden, kann es ggf. erforderlich sein, die Geräte umzustellen.

| Leitfaden und Herstellererklärung: Elektromagnetische Verträglichkeit (IEC 60601-1-2) | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| Die Smokerlyzer®-Geräte sind für die Verwendung in den unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Smokerlyzer® sollte sich vergewissern, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | | |
| Verträglichkeitsprüfung | Prüfereich IEC 60601 | Einhaltungsgrad | Hinweis zu elektromagnetischer Umgebung |
| Gestahlte Störaussendung EN55011:2007 | 30MHz to 1GHz | Eingehalten oder überschritten | None |
| Störfestigkeit gegenüber Störfeldern EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + IS1 2009 + A2:2010 | 10V/m (1kHz 80%) 80MHz – 2.7GHz 385 MHz 27 V/m PM 18 Hz 450 MHz 28 V/m FM 1 kHz sine 710 MHz 9 V/m PM 217 Hz 745 MHz 9 V/m PM 217 Hz 780 MHz 9 V/m PM 217 Hz 810 MHz 28 V/m PM 18 Hz 870 MHz 28 V/m PM 18 Hz 930 MHz 28 V/m PM 18 Hz 1720 MHz 28 V/m PM 217 Hz 1845 MHz 28 V/m PM 217 Hz 1970 MHz 28 V/m PM 217 Hz 2450 MHz 28 V/m PM 217 Hz 5240 MHz 9 V/m PM 217 Hz 5500 MHz 9 V/m PM 217 Hz 5785 MHz 9 V/m PM 217 Hz | Eingehalten oder überschritten | Störungen können durch in der Nähe befindliche Geräte auftreten, die mit folgendem Symbol markiert sind:  |
| Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen EN61000-4-8:2010 | 30 A/m Gegen Magnetfelder empfindliche Geräte | Eingehalten oder überschritten | None |
| Elektrostatische Entladung EN61000-4-2:1995+A1+A2 | 8 kV kontakt 2, 4, 8, 15 kV luft | Eingehalten oder überschritten | None |

COdata⁺™ software – Anschließen an den PC

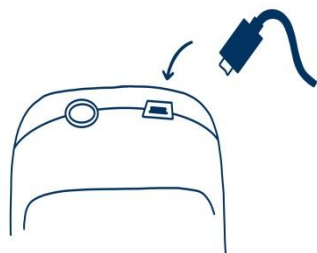



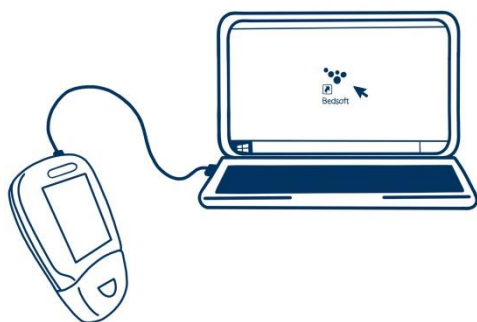


































Stecken Sie ein Ende des Verbindungskabels in die USB-Buchse an der Oberseite des Smokerlyzer[®] ein.
















































Stecken Sie das andere Ende in den USB-Port am PC ein.

Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Software, dass der Smokerlyzer[®] an den PC angeschlossen und eingeschaltet ist. Doppelklicken Sie das Smokerlyzer[®] Symbol auf dem PC, um das Programm zu starten. Siehe die mitgelieferten Unterlagen zum Arbeiten mit der COdata⁺™ Software. Es wird empfohlen, diese Software herunterzuladen und auf einem eigenständigen Rechner ohne Anschluss an ein Netzwerk zu installieren, um für die optimale Sicherheit der Patientendaten zu sorgen. Falls diese Software auf einem gemeinsam genutzten Netzwerk installiert wird, sollten Sie zum Schutz der Patientendaten dafür sorgen, dass sowohl ein Domain-Konto als auch ein Bedsoft-Produktkonto mit einem sicheren Passwort eingerichtet wurde.

Schaltflächen

| Beschreibung | piCO™ | piCO ^{baby} ™ | Micro ⁺ ™ |
|---------------------------|---|---|---|
| Batteriezustand: voll |  |  |  |
| Batteriezustand: niedrig |  |  |  |
| Batteriezustand: leer |  |  |  |
| Atemtest |  |  |  |
| Umgebungsluftmessung | N/V | N/V |  |
| Einstellungen |  |  |  |
| Patientenprofile | N/V | N/V |  |
| Patientenprofile anzeigen | N/V | N/V |  |
| Einatmen |  |  |  |
| Atem anhalten |  |  |  |
| Countdown-Zähler |  |  |  |
| Ausatmen |  |  |  |
| Messwert in ppm | 20 ppm CO | 20 ppm CO | 20 ppm CO |
| %COHb reading | 3.83 %COHb | 3.83 %COHb | 3.83 %COHb |
| Show %FCOHb reading | N/V |  |  |
| %FCOHb reading | N/V | 3.83 %FCOHb |  |
| %COHb-Messwert | N/V | N/V |  |
| Messwert %FCOHb anzeigen |  |  |  |

| | | | |
|--|---|---|---|
| %FCOHb-Messwert |  |  |  |
| CO Werte Umgebung |  |  |  |
| Startbildschirm | N/V | N/V |  |
| D-piece™ auswechseln | N/V | N/V |  |
| Historie | N/V | N/V |  |
| Stumm |  |  |  |
| Nächster Schritt |  |  |  |
| Niedrige Temperatur |  |  |  |
| Hohe Temperatur |  |  |  |
| Countdown bis zum Sensorwechsel |  15/03/2023 |  15/03/2023 |  15/03/2023 |
| Sensor auswechseln |  |  |  |
| Gerät kalibrieren |  |  |  |
| Durchflussmesser am Gasbehälter anbringen |  |  |  |
| Kalibrieradapter an D-piece™ anschließen |  |  |  |
| D-piece™ an den Gerät anschließen und Gasfluss einschalten |  |  |  |
| Kalibrieren der Einheit |  |  |  |
| Kalibrieren erfolgreich |  |  |  |


| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Kalibrieren fehlgeschlagen | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kalibrierung erneut versuchen | ↻ | ↻ | ↻ |
| Firmwareversion | Vers 2.0.1 | Vers 2.0.1 | Vers 2.0.1 |

N/V = Nicht verfügbar an diesem Gerät

Fehlerbehebung

Das Gerät schaltet sich nicht an

Falls sich das Gerät nicht richtig einschalten lässt, überprüfen Sie, ob das Symbol für einen niedrigen Ladestand oder einen leeren Akku angezeigt wird oder wechseln Sie die Batterien aus.

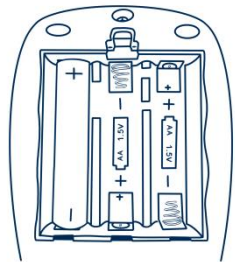

Achten Sie darauf, dass die Batterien den im Kunststoff eingepprägten Symbolen entsprechend richtig herum eingesetzt werden.

Hohe Messwerte für einen als Nichtraucher angegebenen Patienten

Wenn ein Atemtest bei einem Nichtraucher ergibt, dass CO vorhanden ist, kann das ein Anzeichen für folgendes sein:

1. Ein hoher Anteil von CO an der Umgebungsluft (kann auf eine defekte Verbrennungsanlage oder Abgase zurückzuführen sein).
2. Die Auswirkungen von passivem Rauchen.
3. Das Gerät ist durch Alkohol oder eine andere organische Substanz verunreinigt.
4. Der Atem von Patienten kann einen sehr hohen Anteil von Wasserstoff enthalten, der im menschlichen Verdauungsapparat erzeugt werden kann.
5. Der Sensor weicht unter Umständen von den technischen Daten ab (siehe unten).

Der Sensor weicht von den technischen Daten ab

Smokerlyzer® Produkte werden vor dem Versand von Bedfont® kalibriert. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät falsch liest, versuchen Sie es für einen Vergleich noch einmal mit einem anderen Gerät, falls vorhanden. Sie können die Funktion mit Prüfgas von Bedfont® überprüfen oder das Gerät an Bedfont® zurücksenden. Als Prüfgas ist 20 ppm Kohlenmonoxid in Luft von Bedfont® zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor.




1. Vergewissern Sie sich, dass sich das Feinregulierventil in der Position Aus befindet.



2. Schrauben Sie das Feinregulierventil und die Durchflussmesser-Baugruppe auf den Gasbehälter. Das funktioniert am besten, wenn man den Gasbehälter in das Ventil schraubt.



3. Drücken Sie das Symbol "Atemtest" auf dem Bildschirm, um einen Atemtest zu starten.

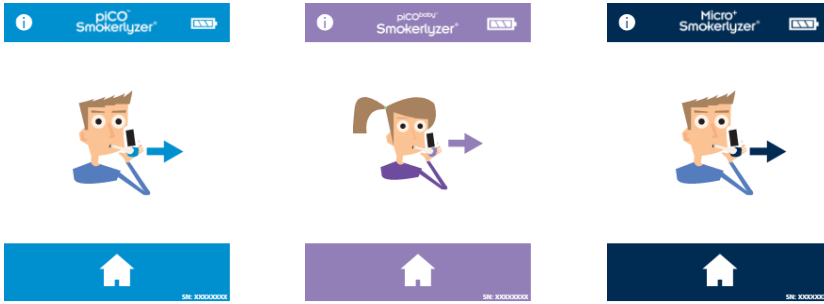


4. Wenn Sie durch das Symbol "Ausatmen" dazu aufgefordert werden, öffnen Sie das Feinregulierventil oder den Regler.



5. Lassen Sie das Gas mit 1 Liter pro Minute strömen.



6. Lassen Sie das Gas für die gesamte Dauer des Tests durch das Gerät strömen und überwachen Sie dabei die Durchflussmenge.

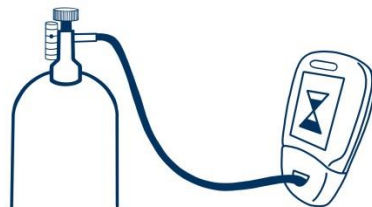

7. Wenn der zuletzt angezeigte Wert unter 15 ppm oder über 25 ppm liegt, stoppen Sie den Test und führen Sie die Kalibrierung durch oder senden Sie das Gerät unter Beachtung der Anweisungen an Bedfont® zurück für eine kostenlose Kalibrierung.

Garantie

Bedfont® Scientific Limited gewährleistet für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Auslieferungsdatum für die Smokerlyzer® Produkte piCO™, piCO^{baby}™ und Micro⁺™ (außer den Batterien), dass sie bei normalem Gebrauch frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Die Haftung von Bedfont® im Rahmen dieser Gewährleistung bleibt nach dessen Ermessen auf die Reparatur oder den Ersatz von dieser Gewährleistung abgedeckten Artikeln beschränkt, vorausgesetzt, der Artikel wird intakt und freigemacht an Bedfont® oder den Vertragshändler vor Ort zurückgesandt.

Diese Garantien werden automatisch ungültig, wenn die Produkte repariert, verändert, die Garantienichtigkeitsschilder entfernt oder anderweitig von unbefugtem Personal manipuliert wurden oder Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfall vorliegt.



Elektronische Geräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts für Anweisungen zur Entsorgung an Bedfont® oder an dessen Vertriebspartner.

Rückgabeverfahren

Bitte wenden Sie sich an Bedfont® oder den lokalen Vertriebspartner, um Anweisungen zur Rücksendung von Waren zu erhalten.

Verantwortlicher Hersteller und Kontaktdaten

Bedfont® Scientific Ltd.
Station Yard, Station Road,
Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA
Großbritannien

www.bedfont.com
ask@bedfont.com
0044 1622 851122



Wenden Sie sich an Bedfont oder einen unserer weltweit vertretenen-Vertriebshändler, um eine kostenfreie Produktdemonstration zu erhalten **Smokerlyzer®**

www.bedfont.com
Tel: +44 (0)1622 851122
Email: ask@bedfont.com

Unsere Familie, die Neuerungen für ihre Gesundheit schafft

Besuch www.bedfont.com/resources um dieses Dokument in anderen Sprachen anzuzeigen.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Ausgabe 14 – April 2024, Teile-Nr.: LAB679_DE

Bedfont Scientific Limited behält sich das Recht vor, diese Literatur ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu aktualisieren. Eingetragen in: England und Wales. Eingetragene Nr.: 1289798

