

Gastrolyzer®

Software GastroCHART™ Manuale d'uso



La nostra famiglia, che innova la salute, per la tua.



Contenuti

Benvenuto in GastroCHART™	2
Installazione	2
Pagina principale	6
Simboli di navigazione	6
Impostazioni generali.....	8
Software GastroCHART™ – connessione al computer (PC)	9
Aggiungi/Modifica pazienti	10
Aggiungi un nuovo paziente.....	10
Modifica/Elimina paziente	10
Dettagli del paziente	11
Strumento per gestire i Breath Test	12
Inizio di un singolo esame	12
Inizio di Test Multipli.....	13
Gestione dei protocolli.....	14
Aggiungi nuovo protocollo.....	14
Modifica di un protocollo.....	14
Elimina un protocollo.....	14
Stampa dei risultati	15

Benvenuto in GastroCHART™


Questo manuale descrive le funzionalità di base del software e guida l'utente su come utilizzare ciascuna funzione. GastroCHART™ può essere utilizzato con Gastro+™ e GastroCH₄ECK® Gastrolyzer® per memorizzare, scaricare e analizzare i risultati.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi Gastro+™ e GastroCH₄ECK®, consultare i manuali stampabili a cui è possibile accedere tramite il menu di aiuto all'interno del software.


NOTA: *Solo los datos técnicos y no los datos de los pacientes son recopilados por Bedfont®.*

Installazione


Per accedere a GastroCHART™, è necessario prima scaricare e installare il software del framework Bedsoft. Se recomienda que este software se descargue e instale en un ordenador independiente, no conectado a una red, para garantizar la seguridad óptima de los datos del paciente. Si este software se instala en una red compartida, asegúrese de que se haya configurado tanto una cuenta de dominio como una cuenta de producto Bedsoft con una contraseña segura para proteger los datos del paciente.

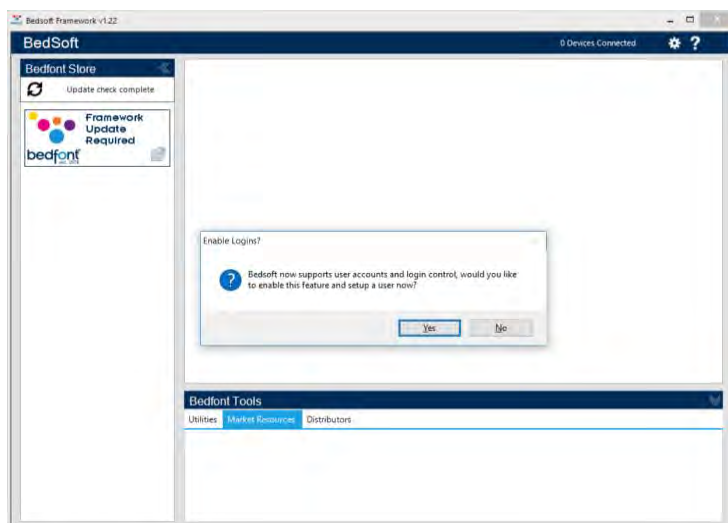


Bedsoft è stato aggiornato per essere conforme ai nuovi standard GDPR, il che significa che ora include account e password per limitare l'accesso non necessario alle informazioni sui pazienti. Una volta che Bedsoft è stato installato e aggiornato, apparirà un messaggio che ti chiederà se desideri impostare gli account utente.

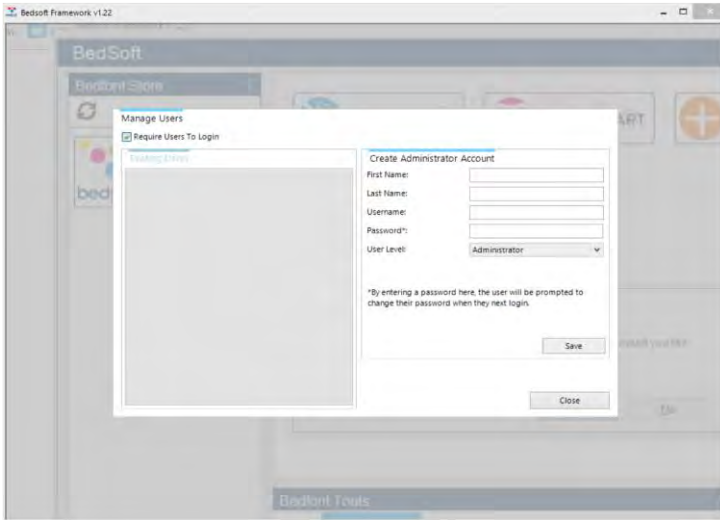

Facendo clic su "SI" ti verrà chiesto di creare il primo account, che avrà privilegi da amministratore.

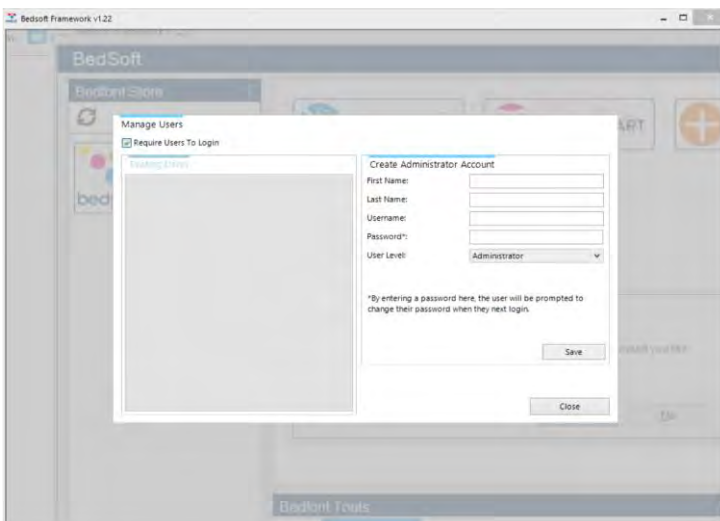


Si consiglia di assegnare al primo account i privilegi da amministratore poiché questo account verrà utilizzato per gestire eventuali utenti futuri qualora dovessero dimenticare i propri dettagli di accesso.

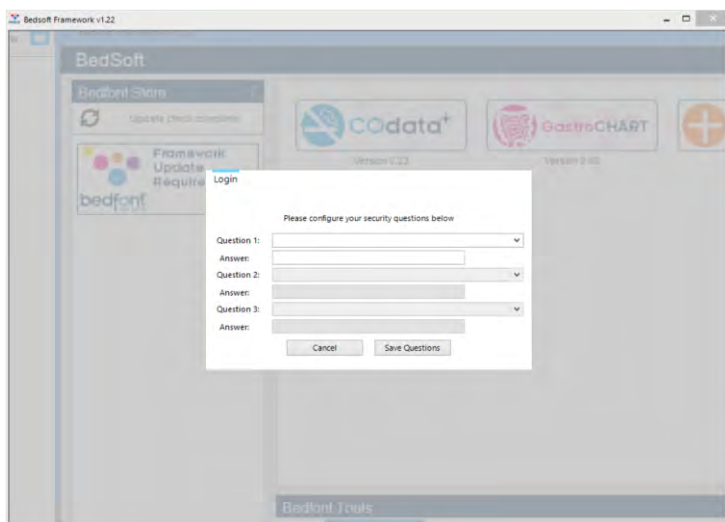


Al primo accesso, ti verrà chiesto di fornire 3 domande e risposte di sicurezza. Le risposte saranno richieste nel caso in cui dovessi dimenticare la tua password.


Nota:

- Un account a livello utente non può accedere al pannello di amministrazione per reimpostare le domande di sicurezza o modificare i privilegi dell'account: solo un account amministratore può accedere al pannello di controllo dell'amministratore per reimpostare domande di sicurezza, password, nome utente e creare / eliminare account.
- All'interno del pannello di amministrazione è disponibile un'opzione per disattivare completamente gli account utente, se si effettua tale operazione, i dettagli del paziente saranno accessibili a chiunque sul computer.
- Per cambiare account, il software Bedsoft deve essere riavviato.
- Se si decide di configurare o di attivare/disattivare gli account utente in un secondo momento, è possibile accedervi dal menu delle impostazioni.

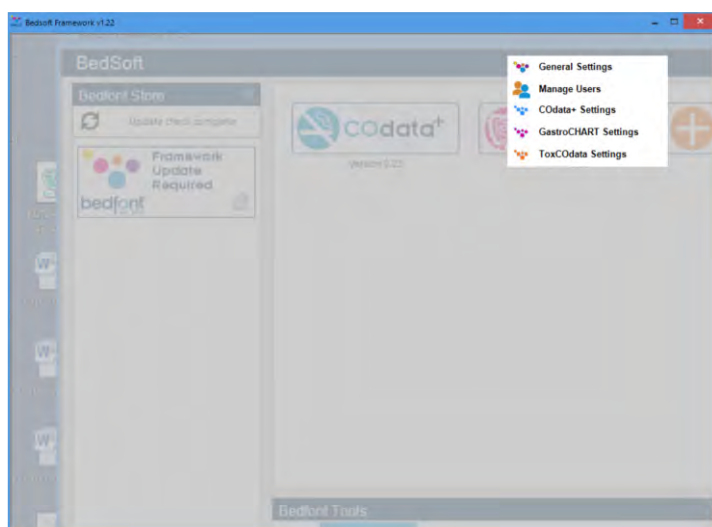

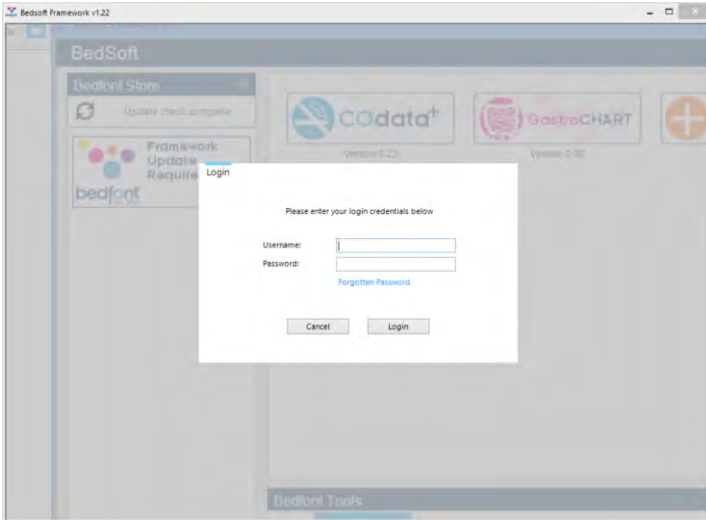


Dopo aver abilitato gli account utente, non sarà possibile accedere a GastroCHART™ senza i propri dati di accesso.

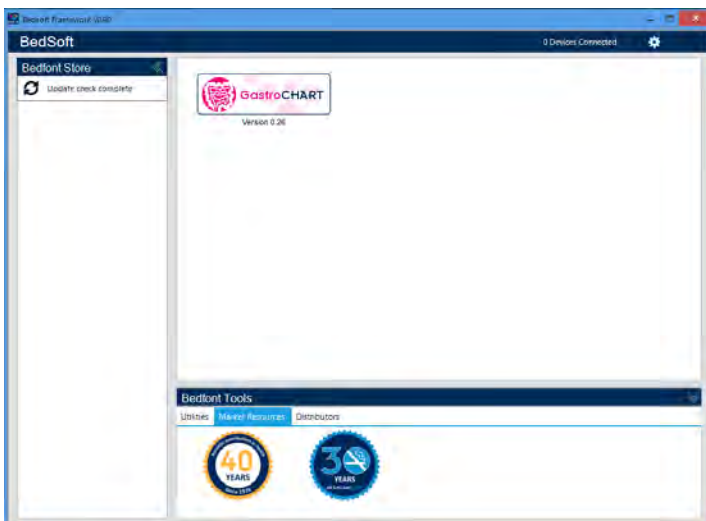





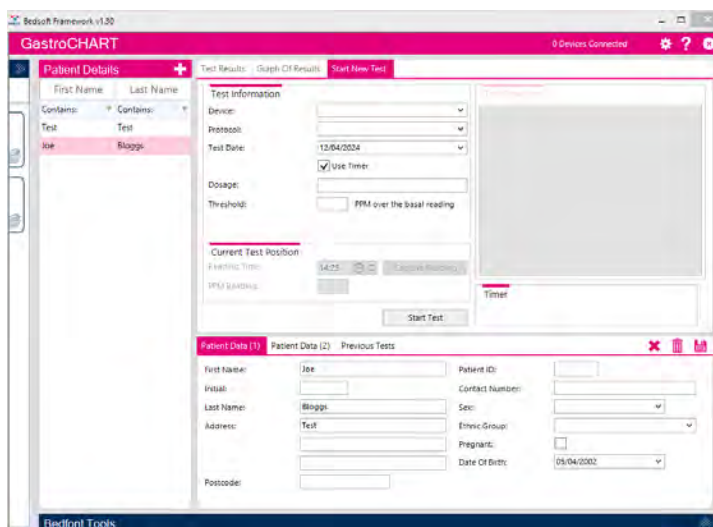



Una volta che Bedsoft è stato scaricato e gli account utente abilitati / disabilitati, GastroCHART™ può essere scaricato e installato dal lato sinistro dello schermo, sotto l'intestazione Bedfont® Store. Una volta completata l'installazione di GastroCHART™, la scheda del software si sposterà al centro dello schermo, come mostrato di seguito.

Pagina principale




Fare clic sulla scheda GastroCHART™ per aprire la finestra principale del software. Questo è il layout principale del programma.

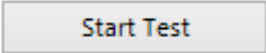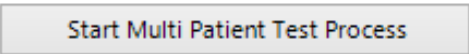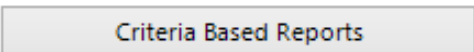Simboli di navigazione

Descrizione	Icona
Aggiungi/Modifica pazienti	
Strumenti di gestione	
Inizia un esame	
Inizia esami su più pazienti	
Icona Genera Referto	
Icona Chiudi	
Icona Salva	
Icona Elimina	


Icona Cancella Selezione paziente	
Stato della connessione del dispositivo	
Importa/esporta File	
Aiuto	
E-mail	
Stampa	
Sincronizar	

Impostazioni generali

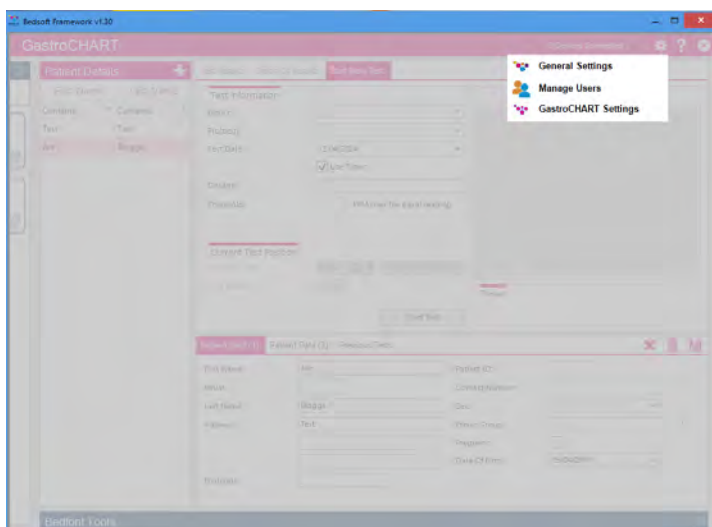


Questa sezione consente di modificare le impostazioni del server proxy e le impostazioni del server di posta elettronica. Fare clic sull'icona degli strumenti di gestione e selezionare le impostazioni generali:

- Impostazioni generali
- Impostazioni COdati+™
- Impostazioni GastroCHART™

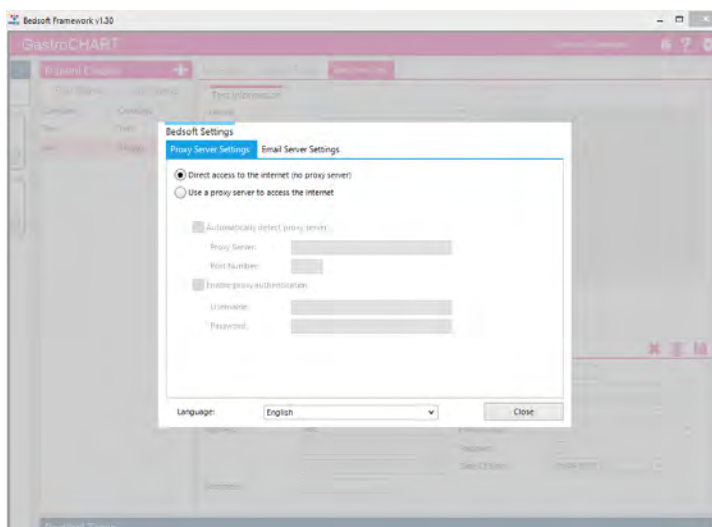


Da qui puoi modificare le impostazioni del server proxy e le impostazioni del server di posta elettronica.

Software GastroCHART™ – connessione al computer (PC)

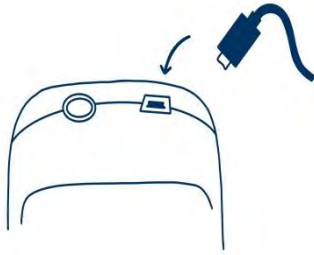

Inserire un'estremità del cavo di connessione nella presa USB situata sulla parte superiore del prodotto Gastro+™ Gastrolyzer®.

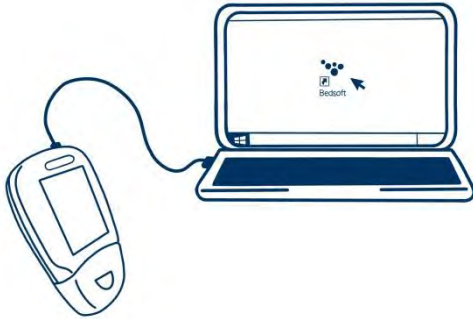

Inserire l'altra estremità nella porta USB del PC.

Prima di avviare il software, assicurarsi che Gastro+™ Gastrolyzer® sia collegato al PC e sia acceso. Fare doppio clic sull'icona GastroCHART™ del PC per avviare il programma. Fare riferimento alla documentazione fornita per conoscere le modalità di utilizzo di GastroCHART™. GastroCHART™ è disponibile GRATUITAMENTE per il download accedendo a <https://www.gastrolyzer.com>

Aggiungi/Modifica pazienti

Questa funzione consente di gestire i pazienti inseriti all'interno del software. Da qui è possibile aggiungere nuovi pazienti e modificare o eliminare pazienti esistenti.

Aggiungi un nuovo paziente

Per aggiungere un nuovo paziente, fare clic sul pulsante accanto a "Dettagli paziente", quindi compilare semplicemente il modulo nella metà inferiore dello schermo. Devi completare almeno un campo in anagrafica (cognome o nome) e specificare un indirizzo o un numero di contatto. Anche il campo della data di nascita è obbligatorio e deve riportare una data anteriore quella odierna, tutti gli altri campi sono facoltativi.

Modifica/Elimina paziente


Per trovare un paziente da modificare è possibile utilizzare le i filtri presenti nella parte superiore dello schermo. Questi filtri sono identificati dal testo "Contenuto", ().

Facendo clic sul pulsante grigio del menù a tendina per impostare un filtro verrà visualizzato un elenco di potenziali filtri. In alternativa, si può digitare un termine di ricerca e fare clic sulla casella del filtro per impostarlo.

Per modificare un paziente, fare clic sulla riga appropriata nell'elenco e la sezione inferiore si aggiornerà per visualizzare i dettagli del paziente, se si sta già modificando un paziente verrà richiesto di salvare il paziente corrente. Apporta le modifiche necessarie e fai clic su per salvare le modifiche. Se si desidera eliminare il paziente dal software è possibile fare clic sull'icona.


Dettagli del paziente

I profili paziente sulla sinistra dello schermo contengono tutti i dati precedentemente salvati, inclusi i risultati degli esami già effettuati in passato di quel determinato paziente. Quando un paziente viene selezionato dall'elenco sul lato sinistro dello schermo, sul lato destro dello schermo appariranno le sue informazioni in due sezioni separate.

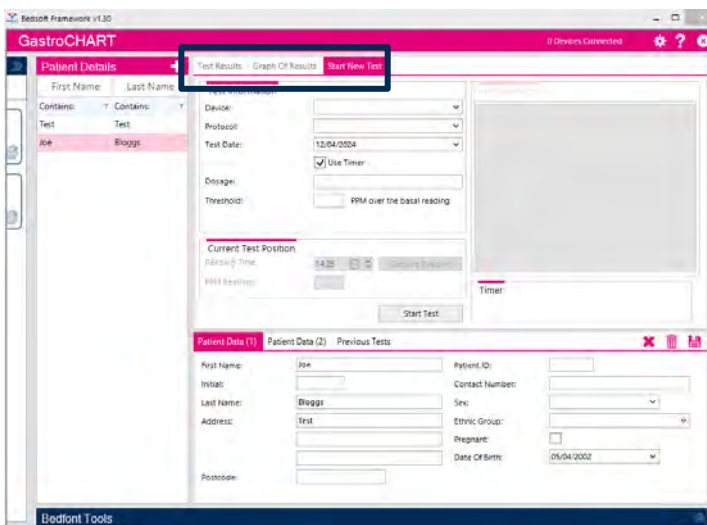

La sezione superiore ha tre schede differenti che vengono riempite con i dati dell'esame del paziente a seconda del test effettuato:

- La prima scheda mostra le letture degli ultimi esami eseguiti dal paziente. Questi risultati possono essere visualizzati selezionando la scheda "test precedenti" nella sezione inferiore della schermata dove vengono visualizzati i dati del paziente
- La seconda scheda mostra i valori in PPM riportati su un grafico in cui è presente anche una linea indicante il valore di soglia del protocollo utilizzato
- La terza scheda consente di avviare un nuovo test

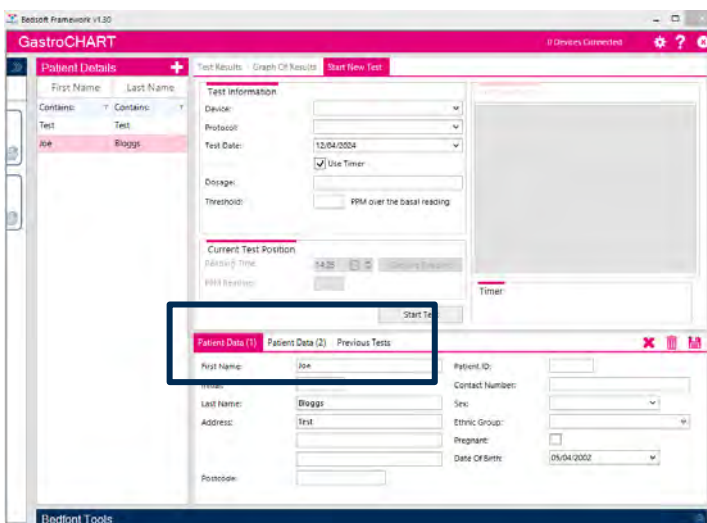

La sezione inferiore mostra altre tre schede da poter selezionare:

- La prima scheda mostra un riepilogo dei dettagli anagrafici del paziente
- La seconda scheda mostra le prescrizioni fornite, le note, i sintomi osservati prima del test e i farmaci da poter prescrivere al paziente
- La terza scheda contiene eventuali esami precedenti da poter visionare e controllare nuovamente


Strumento per gestire i Breath Test

La funzione per realizzare esami di Breath Test può essere utilizzata per uno o più pazienti con Gastro⁺™ e GastroCH₄ECK® Gastrolyzer®.

Inizio di un singolo esame


Prima di iniziare un test singolo, selezionare il paziente appropriato dall'elenco. È possibile filtrare l'elenco utilizzando i campi appositi; inserendo eventuali criteri di ricerca applicabili, l'elenco verrà aggiornato automaticamente. Per eseguire un test, selezionare prima un dispositivo, quindi il protocollo dal menu a tendina. Per eseguire un test, selezionare prima un dispositivo, quindi il protocollo dal menu a tendina.

Immettere il dosaggio del substrato assunto dal paziente, il valore di soglia del protocollo e specificare la data e l'ora della prima lettura. Se si prevede di eseguire il test in tempo reale, è necessario controllare che la casella "usa timer" sia selezionata.

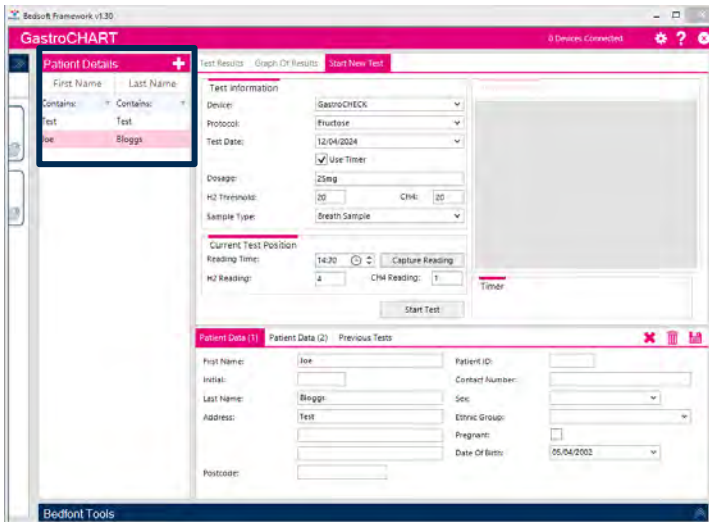


Fare clic sull'icona per iniziare l'esame. Se viene utilizzato il timer, verrà visualizzato un conto alla rovescia per la lettura successiva.

Dopo di chè si continuerà a eseguire le letture quando richiesto fino al termine del test. Alla fine del test si può inserire un'interpretazione dell'esame complete.

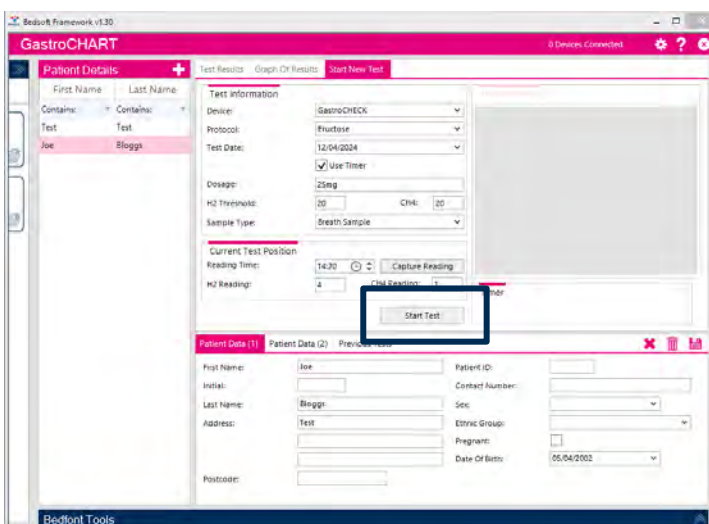

Inizio di Test Multipli

Per eseguire un test multi-paziente, assicurarsi innanzitutto che non sia selezionato alcun paziente (qualsiasi selezione può essere cancellata cliccando sull'icona posta sopra i dettagli del paziente).

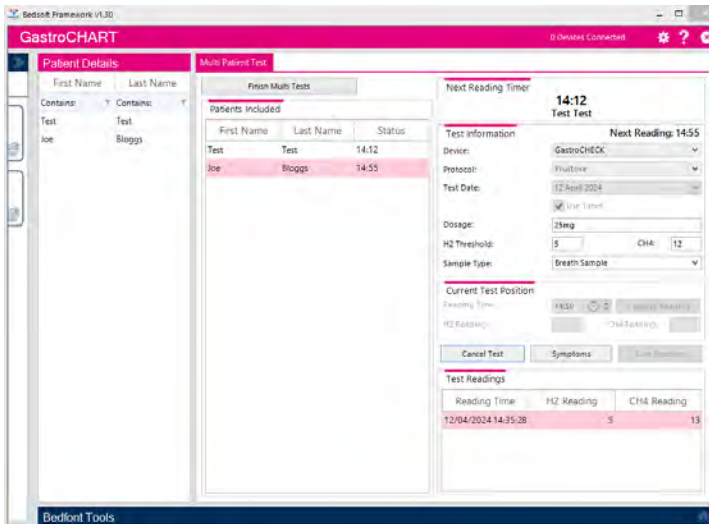


A questo punto, l'icona diventerà disponibile. Cliccando sull'elenco dei pazienti, verranno aggiunti all'elenco multi-test; non c'è un numero limite di pazienti che possono essere selezionati. Quindi, seleziona la tipologia di dispositivo dal menu a tendina dedicato e il dispositivo in uso

Immettere il dosaggio del substrato assunto dal paziente, il valore di soglia del protocollo e specificare la data e l'ora della prima lettura. A questo punto, cliccare su "avvia test" per iniziare, apparirà un conto alla rovescia dedicato per eseguire la lettura successiva.

Si potrà continuare ad aggiungere pazienti e ad effettuare le varie letture di ciascun paziente fino al termine di ogni esami.

Alla fine del test si può inserire un'interpretazione dell'esame complete.

Gestione dei protocolli

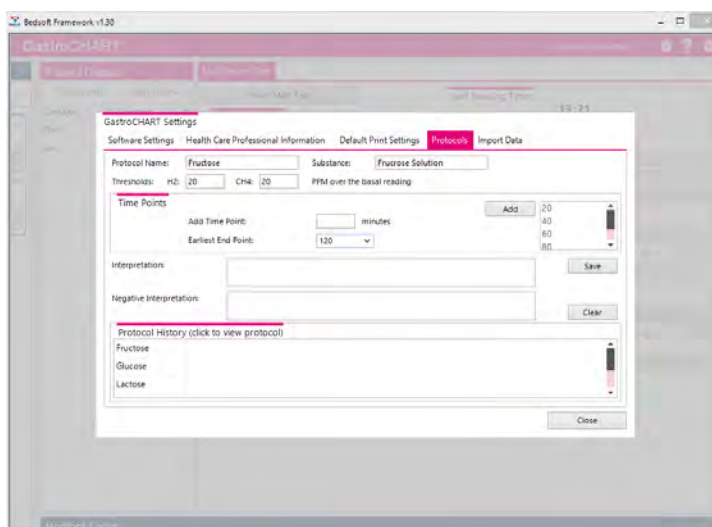

Questa funzione consente di creare i propri protocolli da utilizzare all'interno del software.

Per aggiungere/modificare/eliminare un protocollo, basta accedere alle impostazioni di GastroCHART™ cliccando su e selezionando la scheda "protocolli" nella parte superiore della finestra di impostazioni apparsa.

Aggiungi nuovo protocollo

Per aggiungere un nuovo protocollo, dovranno essere compilate le caselle del nome del protocollo, del substrato utilizzato e del valore di soglia del test, seguite, poi, dai punti temporali in cui devono essere effettuate le letture.

Al termine, basterà indicare il primo punto in cui poter terminare l'esame una volta lanciato il test e fare clic su "salva" per memorizzare il protocollo.

Modifica di un protocollo


Per modificare un protocollo esistente, cliccare sull'icona appropriata e modificare i valori predefiniti del test.

Fare clic su "Salva" per mantenere le modifiche.

Elimina un protocollo

Per eliminare un protocollo esistente, fare clic sulla voce dedicata e fare clic sul pulsante "Elimina". Appare un messaggio di conferma e, se confermato, il profilo verrà cancellato.

Stampa dei risultati

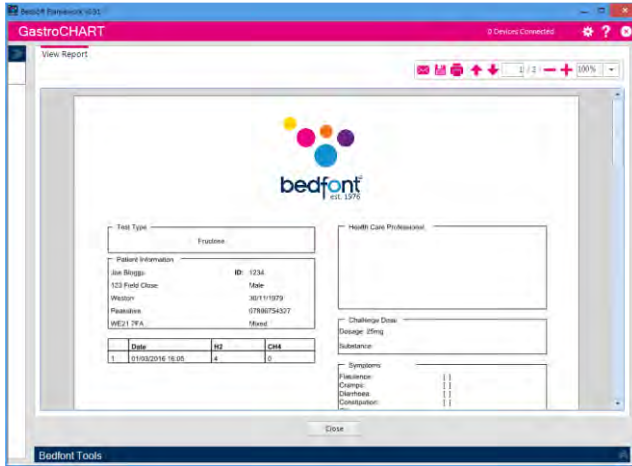

Per trovare un paziente e stamparne i risultati/referti è possibile utilizzare i filtri di ricerca. Si può inserire, ad esempio, un ID paziente o parte di un cognome e l'elenco si aggiornerà automaticamente.

Per produrre un referto in PDF dell'esame del paziente selezionato, è necessario solamente cliccare sul pulsante "stampa risultati".


Dopo di chè basterà selezionare i diversi criteri mostrati sulla stampa per inserire o meno informazioni sul report finale.

La scheda finale consente di inserire un'interpretazione per il paziente; questo viene stampato sul report PDF.


Queste schede possono essere utilizzate insieme alle quattro schede nella parte superiore dello schermo.

Generare un referto


L'utente ha varie opzioni per personalizzare il grafico dei risultati del paziente. Seleziona "Grafico dei risultati" dalle opzioni della scheda nella parte superiore del software. L'asse X può essere modificato utilizzando il menu a discesa tra "Tempi di lettura effettivi" che descrive in dettaglio il tempo in cui sono stati condotti i test dei pazienti e "Punti temporali del protocollo" che mostra i punti temporali in base al protocollo utilizzato.

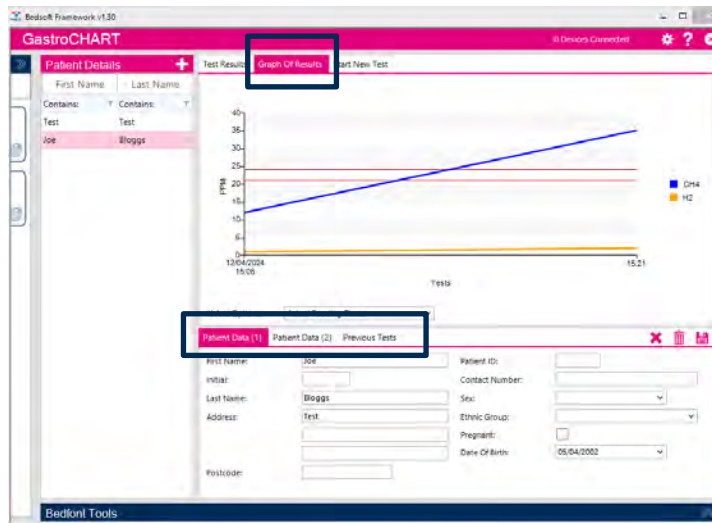

L'opzione dell'asse X selezionata verrà visualizzata nel report generato.

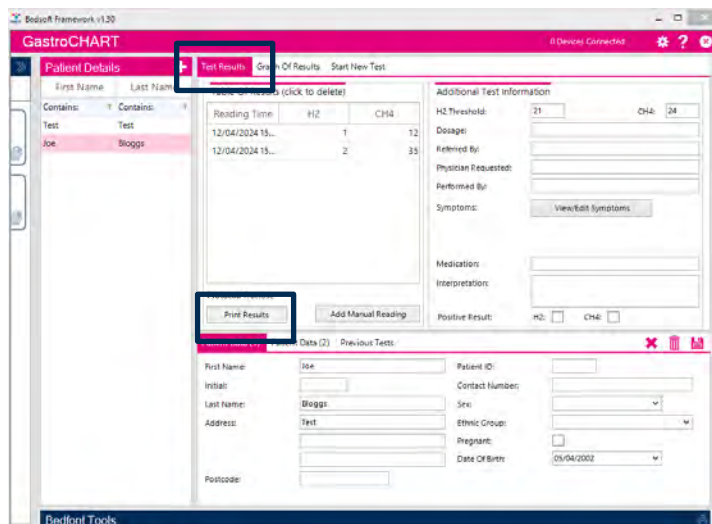


Per generare il rapporto, seleziona la scheda "Risultati del test" dalle opzioni nella parte superiore del software, quindi seleziona "Stampa risultati".

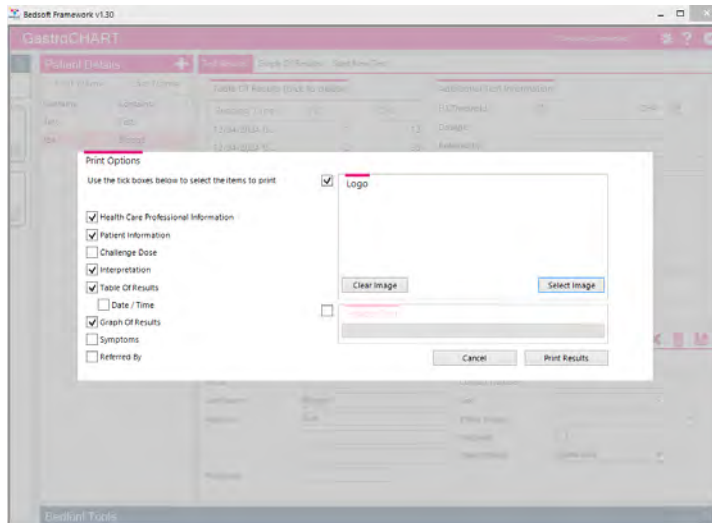

Apparirà una finestra pop-up che consentirà di personalizzare il contenuto dei risultati.

Selezionare "Stampa risultati" per stampare o "Annulla" per tornare alla schermata principale.

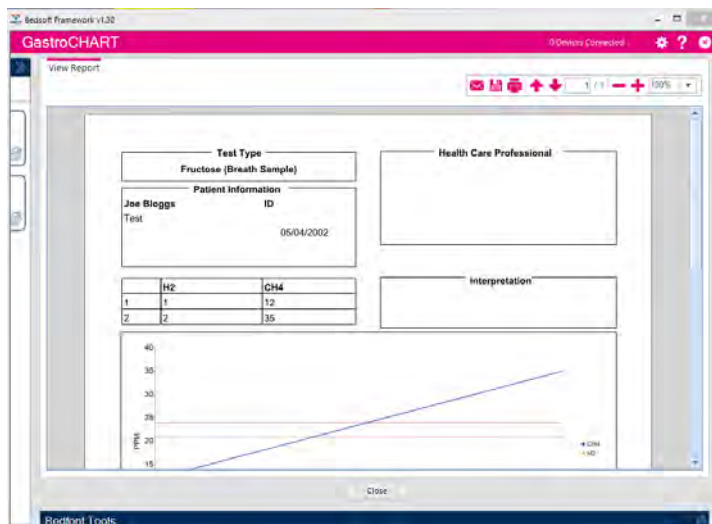

Per salvare il report in formato PDF, seleziona l'icona "salva" nella parte superiore dello schermo.



bedfont[®]
est. 1976

Contatta Bedfont[®] o uno dei nostri in tutto il mondo **Gastrolyzer[®]**
distributori per una dimostrazione gratuita.

www.bedfont.com
Tel: +44 (0)1622 851122
Email: ask@bedfont.com

La nostra famiglia, che innova la salute, per la tua.

Visita www.bedfont.com/resources per visualizzare questo documento in altre lingue.



Bedfont[®] Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont[®] Scientific Limited 2024

Numero 9 - Aprile 2024, codice: LAB705_IT
Bedfont[®] Scientific Limited si riserva il diritto di modificare o aggiornare la sua
documentazione senza preavviso. Registrato in: Inghilterra e Galles. Numero registrato: 1289798

